

PROTAINER®

Click-seal system for sample integrity



PROmed®

FLMEDICAL

ONE CLICK, TOTAL SEAL

Sample protected

PROtainer®

Sample collection requires reliable processes, as much as their storage and transport. The new Protainer® containers are designed to ensure safety and functionality at every operational stage. The final "click" of the cap gives the operator confirmation that the product is correctly closed, with no need for further checks.

EL CLIC, CIERRE COMPLETO Muestra preservada

La recogida de las muestras requiere procesos fiables, así como su conservación y transporte. Los nuevos contenedores Protainer® están diseñados para garantizar la máxima seguridad y la funcionalidad en todas las fases operativas. El "clic" final del tapón ofrece al operador la confirmación de que el producto está correctamente cerrado, sin necesidad de verificaciones adicionales.

LE CLIC, FERMETURE COMPLÈTE Échantillon préservé

La collecte d'échantillon nécessite des processus fiables, pour le recueil comme pour la conservation et le transport. Les nouveaux pots Protainer® sont conçus pour garantir la sécurité et la fonctionnalité à chaque étape du processus. Le "clic" final du bouchon confirme à l'opérateur la bonne fermeture du produit, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres vérifications.

IL CLICK, CHIUSURA COMPLETA Campione protetto

La raccolta dei campioni richiede processi affidabili, così come la loro conservazione e il trasporto. I nuovi contenitori Protainer® sono ideati per garantire la massima sicurezza e la funzionalità in tutte le fasi operative. Il "click" finale del tappo fornisce all'operatore una conferma della corretta chiusura del prodotto senza la necessità di ulteriori verifiche.

APPLICATIONS

Suitable for a wide range of analyses

Protainer® is a single-use container designed to meet the needs of collecting, storing, and transporting samples intended for laboratory, food, and industrial analysis.

It can be used for samples intended for chemical-physical and microbiological analysis, as well as for the collection and transport of food and water.

The chemical resistance of the materials used in its production makes it suitable for use with a wide range of substances and compounds, preserving the container's structural integrity under standard operating conditions.

Food sampling

Milk sampling

Water sampling

Industry sampling

APLICACIONES

Apto para diferentes tipos de análisis

Protainer® es un contenedor de un solo uso diseñado para satisfacer las necesidades de recogida, conservación y transporte de muestras destinadas a análisis de laboratorio, alimentarios e industriales.

Puede utilizarse para muestras destinadas a análisis químico-físicos y microbiológicos, así como para la recogida y el transporte de productos alimentarios e hídricos.

La resistencia química de los materiales utilizados en su fabricación lo hace apto para su uso con una amplia gama de sustancias y compuestos, preservando la integridad estructural del contenedor en condiciones operativas estándar.

APPLICATIONS

Adapté à différents types d'analyses

Protainer® est un pot à usage unique conçu pour répondre aux besoins de collecte, de conservation et de transport d'échantillons destinés à des analyses de laboratoire, alimentaires et industrielles.

Il peut être utilisé pour des échantillons destinés à des analyses physico-chimiques et microbiologiques, mais aussi pour la collecte et le transport de produits alimentaires et des échantillons d'eau.

La résistance chimique des matériaux utilisés pour sa fabrication le rend adapté pour une large gamme de substances et de composés, en préservant l'intégrité structurelle du conteneur dans des conditions d'utilisation standard.

APPLICAZIONI

Adatto a diversi tipi di analisi

Protainer® è un contenitore monouso progettato per rispondere alle esigenze di raccolta, conservazione e trasporto di campioni destinati ad analisi di laboratorio, alimentari e industriali.

Può essere utilizzato per campioni destinati ad analisi chimico-fisiche e microbiologiche, ma anche per la raccolta e il trasporto di prodotti alimentari e idrici.

La resistenza chimica dei materiali utilizzati nella sua produzione lo rende adatto all'impiego con un'ampia gamma di materie e composti, preservando l'integrità strutturale del contenitore in condizioni operative standard.

PROTAINER®

The most complete container ever

Protainer® is made of ultra-transparent polypropylene with high mechanical strength, allowing immediate visibility of the contents. The dual ml/oz graduation makes it easy to read in different application contexts, while the stackable design optimizes space organization. The triple closure system with a final click ensures an airtight seal, preventing leaks and contamination at every stage of the process. It is compatible with pneumatic transport systems and it is food contact certified.

PROTAINER®

El contenedor más completo de siempre

Protainer® está fabricado en polipropileno ultra-transparente de elevada resistencia mecánica, que permite una visibilidad inmediata del contenido. La doble graduación ml/oz facilita la lectura en diferentes contextos de aplicación, mientras que el diseño apilable optimiza la organización de los espacios. El triple sistema de cierre con clic final garantiza un sellado hermético, evitando pérdidas y contaminaciones en cada fase del proceso. Además, es compatible con los sistemas de transporte neumático y está certificado para el contacto con alimentos.

PROTAINER®

Le conteneur le plus complet jamais conçu

Protainer® est fabriqué en polypropylène ultra-transparent à haute résistance mécanique, offrant une visibilité immédiate du contenu. La double graduation ml/oz facilite la lecture dans différents contextes d'application, tandis que son design empilable optimise l'organisation des espaces. Le triple système de fermeture avec clic final garantit une étanchéité hermétique, prévenant les fuites et les contaminations à chaque étape du processus. De plus, il est compatible avec les systèmes de transport pneumatique et il est certifié pour le contact avec les aliments.

PROTAINER®

Il contenitore più completo di sempre

Protainer® è realizzato in polipropilene ultra-trasparente ad elevata resistenza meccanica che consente una visibilità immediata del contenuto. La doppia graduazione ml/oz facilita la lettura in diversi contesti applicativi, mentre il design impilabile ottimizza l'organizzazione degli spazi. Il triplo sistema di chiusura con il click finale assicura una tenuta ermetica, prevenendo perdite e contaminazioni in ogni fase del processo. Inoltre, è compatibile con i sistemi di trasporto pneumatico e ed è certificato per il contatto con alimenti.

Unbreakable

Superior clarity

Double graduation in ml and Oz

Stackable

Click seal system

Three-start closing thread

Suitable for pneumatic systems

Food contact certified

COLORS AND FORMATS

A wide range of solutions for every need

The new Protainer® containers are produced in five different volumes 40, 60, 90, 125 and 180 ml in sterile and ISO 8 cleanroom versions, individually wrapped or in bulk. The caps are available in white, red and blue as standard colors but also in yellow and green upon request.

COLORES Y FORMATOS

Amplia gama de soluciones para cada necesidad

Los nuevos Protainer® se fabrican en cinco volúmenes diferentes, 40, 60, 90, 125 y 180 ml, en versión estéril y ISO 8 cleanroom, envasados individualmente o a granel. Los tapones están disponibles en los colores estándar blanco, rojo y azul, pero también en amarillo y verde bajo pedido.

COULEURS ET FORMATS


Large gamme de solutions pour chaque besoin

Les nouveaux Protainer® sont produits en cinq capacités, 40, 60, 90, 125 et 180 ml, en version stérile et ISO 8 cleanroom, conditionnés individuellement ou en vrac. Les bouchons sont disponibles dans les couleurs standard blanc, rouge et bleu, mais aussi en jaune et vert sur demande.

COLORI E FORMATI

Ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza

I nuovi Protainer® sono prodotti in cinque volumi differenti, 40, 60, 90, 125 e 180 ml in versione sterile e ISO 8 cleanroom, confezionati singolarmente o sfusi. I tappi sono disponibili nei colori standard bianco, rosso e blu, ma anche in giallo e verde su richiesta.

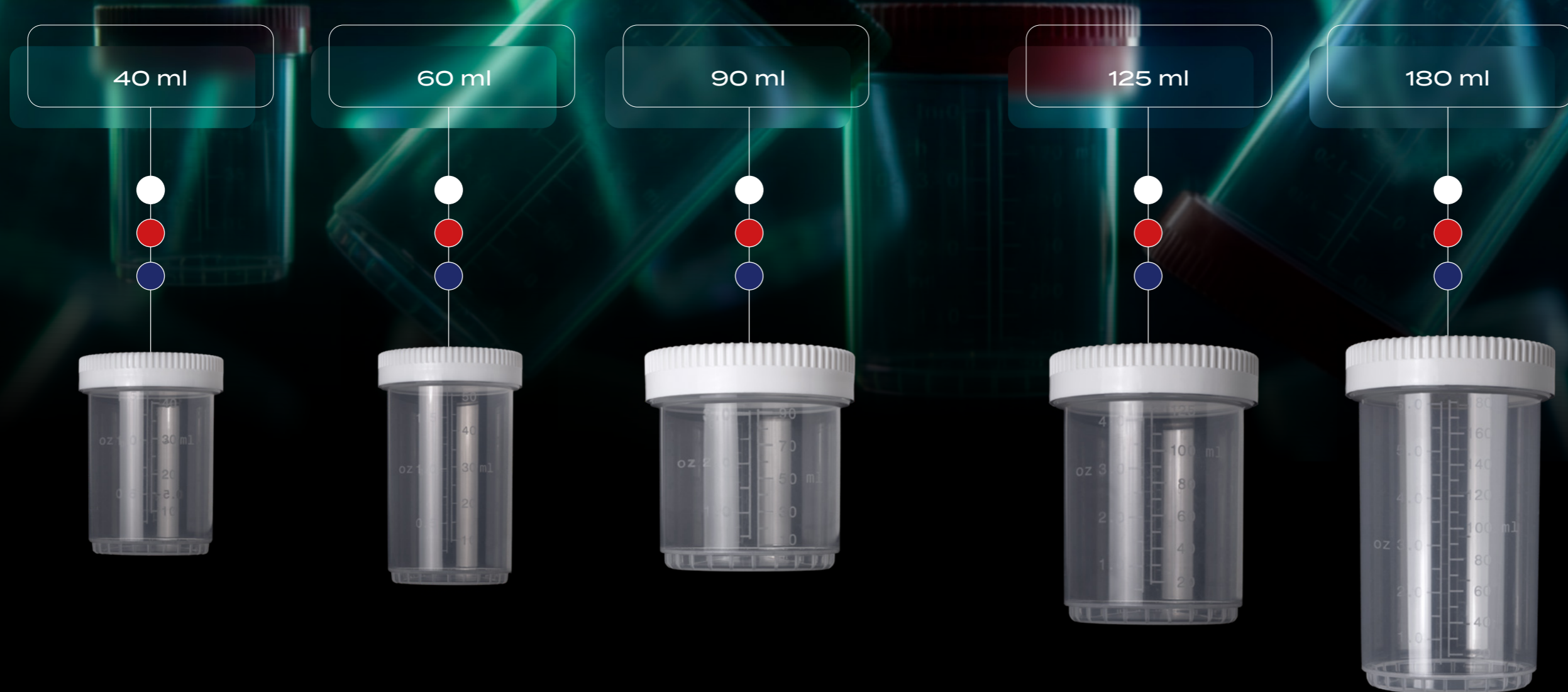

PRODUCT LIST

Product code	Capacity	Sterility	Cap color	Packaging
25501	40 ml	ISO 8	● white	in bulk
25505	40 ml	ISO 8	● red	in bulk
25509	40 ml	ISO 8	● blue	in bulk
25502	40 ml	ISO 8	● white	individually wrapped
25506	40 ml	ISO 8	● red	individually wrapped
25510	40 ml	ISO 8	● blue	individually wrapped
25521	60 ml	ISO 8	● white	in bulk
25525	60 ml	ISO 8	● red	in bulk
25529	60 ml	ISO 8	● blue	in bulk
25522	60 ml	ISO 8	● white	individually wrapped
25526	60 ml	ISO 8	● red	individually wrapped
25530	60 ml	ISO 8	● blue	individually wrapped
25541	90 ml	ISO 8	● white	in bulk
25545	90 ml	ISO 8	● red	in bulk
25549	90 ml	ISO 8	● blue	in bulk
25542	90 ml	ISO 8	● white	individually wrapped
25546	90 ml	ISO 8	● red	individually wrapped
25550	90 ml	ISO 8	● blue	individually wrapped
25561	125 ml	ISO 8	● white	in bulk
25565	125 ml	ISO 8	● red	in bulk
25569	125 ml	ISO 8	● blue	in bulk
25562	125 ml	ISO 8	● white	individually wrapped
25566	125 ml	ISO 8	● red	individually wrapped
25570	125 ml	ISO 8	● blue	individually wrapped
25581	180 ml	ISO 8	● white	in bulk
25585	180 ml	ISO 8	● red	in bulk
25589	180 ml	ISO 8	● blue	in bulk
25582	180 ml	ISO 8	● white	individually wrapped
25586	180 ml	ISO 8	● red	individually wrapped
25590	180 ml	ISO 8	● blue	individually wrapped

Product code	Capacity	Sterility	Cap color	Packaging
25503	40 ml	sterile	● white	in bulk
25507	40 ml	sterile	● red	in bulk
25511	40 ml	sterile	● blue	in bulk
25504	40 ml	sterile	● white	individually wrapped
25508	40 ml	sterile	● red	individually wrapped
25512	40 ml	sterile	● blue	individually wrapped
25523	60 ml	sterile	● white	in bulk
25527	60 ml	sterile	● red	in bulk
25531	60 ml	sterile	● blue	in bulk
25524	60 ml	sterile	● white	individually wrapped
25528	60 ml	sterile	● red	individually wrapped
25532	60 ml	sterile	● blue	individually wrapped
25543	90 ml	sterile	● white	in bulk
25547	90 ml	sterile	● red	in bulk
25551	90 ml	sterile	● blue	in bulk
25544	90 ml	sterile	● white	individually wrapped
25548	90 ml	sterile	● red	individually wrapped
25552	90 ml	sterile	● blue	individually wrapped
25563	125 ml	sterile	● white	in bulk
25567	125 ml	sterile	● red	in bulk
25571	125 ml	sterile	● blue	in bulk
25564	125 ml	sterile	● white	individually wrapped
25568	125 ml	sterile	● red	individually wrapped
25572	125 ml	sterile	● blue	individually wrapped
25583	180 ml	sterile	● white	in bulk
25587	180 ml	sterile	● red	in bulk
25591	180 ml	sterile	● blue	in bulk
25584	180 ml	sterile	● white	individually wrapped
25588	180 ml	sterile	● red	individually wrapped
25592	180 ml	sterile	● blue	individually wrapped



FL Medical Srl Unipersonale

Via Enrico Mattei, 20

35038 Torreglia (PD) - Italy

T +39 049 5211475 /

+39 049 5212835

F +39 049 5212566

www.flmedical.com

www.vacumed.it

info@flmedical.com